

Desinfektion

Brug klorfrit desinfektionsmiddel til at tørre og desinficere varmeålen. Cavalicide desinfektionsmiddel anbefales.

Tørring

Efter rengøring og desinfektion anbefales det igen at tørre -ger til at bruge trykluft til at tørre.

Sterilisation

- 1.Sterilisable dele: Pen tips
- 2.Før sterilisering skal du bruge en steriliseringspose, der opfylder kravene i de nationale emballageregler.
- 3.Steriliseringsmetode: dampsterilisering ved høje temperaturer
- 4.Steriliseringsforhold: 134°C i ikke mindre end 5 minutter.

Forklaring af garantien

Som producent tager vi kun ansvar for det defekte produkt, der er forårsaget af materialet og fremstillingsprocessen, hvis det stadig er inden for en 1 års garanti. Garantien for hovedenheden af dette udstyr gælder for 12

batteri i 6 måneder. Eventuelle skader forårsaget af uautoriseret tredje part, vil ikke tage noget ansvar!

Driftsmiljø og opbevaring, Transportbetingelser

Driftsmiljø (anderledes)

Højtemperatur: +5°C - +40°C Relativhumiditet: 20%-80%
Lufttryk: 860 hPa-1060hPa

Transport- og opbevaringsforhold

Omgivelsestemperatur: +5°C - +40°C
Relativ menneskelighed: ≤93%
Lufttryk: 860 hPa-1060hPa

4

Teknisk parameter

- 1.Håndtag størrelse: Længde: 126mm B: 19mm
 - 2.Strømspenning: 230V / 50Hz eller 110V / 60HZ
 - 3.Inngangseffekt: 5 W
- Elektrisk stødbeskyttelse: Type B

Genbrug og bortskaffelse

- Brugsmateriel bortskaffes i overensstemmelse med landets (regionens) regler og standarder. Sørg for, at alle komponenter ikke er forurenet, når de bortskaffes.

Symboler



Advarsel



advarsel



lodret op



Skrøbelige



Hold dig i gang, det er mig!



Weee



roducent af løbenummer



Klasse II-udstyr (adapter)



Se brugsanvisningen/hæftet Type B-



udstyr



Brug kun indendørs



Med det samme



CE-mærket produkt



Den Europæiske Union



Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd

BLDG 4, District A Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue Nanhai District Foshan 528226 Guangdong China
E-mail: coxotec@163.com
Http: //www.coxotec.com



Lotus NL B.V.


Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com

5

Ver2, det er mig, 1 Revisjonsdato: 2020-

Gutta nedskæringer

C-BBakke

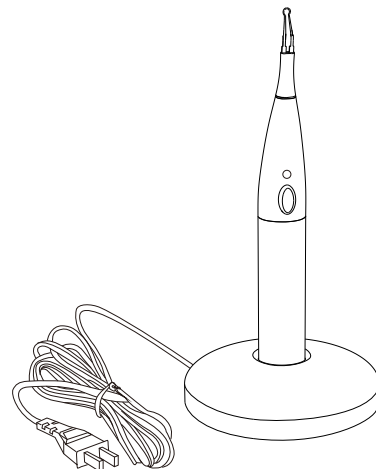

Sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel: Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger dette udstyr, som vil hjælpe dig med at bruge det korrekt.

1. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger dette udstyr.
2. Brug apparatet i overensstemmelse med den påtænkte anvendelse. Producenten påtager sig intet ansvar, hvis brugeren ikke bruger apparatet i overensstemmelse med instruktionerne eller bruger apparatet til andre formål.
3. Når du bruger en ekstern strømforsyning, skal du sørge for, at v-oltage er inden for det spændingsområde, der er angivet på enheden for at undgå skader på operatøren eller patienten.
4. Rør ikke patientens læber, tandkød eller slimhinder med blødt væv for at undgå skoldning til operatøren eller patienten. Apparatet skal anvendes uden for patientens mund.
5. Rør ikke ved den opvarmede varmeål med brandfarlig gas eller væske, da det kan medføre brandfare.
6. Dette udstyr kan ikke anvendes i miljøet med brændbare gasser.
7. Apparatet må ikke nedsænkes i væske.
8. Hvis der er væskelækage fra udstyret, skal du straks holde op med at bruge det og kontakte producenten og den autoriserede forhandler med henblik på bortskaffelse.
9. Hjertesygdomme, gravide kvinder og børn bør anvendes med afvaskning.
10. Dette udstyr er kun til professionelle.

Standardkonfiguration

Guttacutter håndtak	1
Laderbase	1
Pennetips (4st)	1

Påtænkt anvendelse

Dette produkt er kun tilgængeligt for den veluddannede tandlæge og tandlaboratorium, der går ind for kirurgi for at fylde rodkanalen, som bruges til at skære den ekstra gutta percha fra rodkanalen.

Kontraindikationer (kontraindikationer)

Personer, der er implanteret med pacemaker eller andet system, er forbudt!

Instruktioner

Kontroller, om strømkildens spænding svarer til udstyret for opladning.

Indlæs

1. Tilslut først opladeren til strømkilden.
2. Sæt enheden i opladningsbasen, når enheden er inde i opladningsåbningen, lysindikatoren på håndtaget lyser.

Beskrivelse af batteriet

1. Før du bruger enheden første gang, skal du sørge for, at den er fuldt opladet.
2. Batteriet må ikke oplades, når det er opbrugt.
3. For at oplade enheden fuldt ud skal opladningstiden være mere end 12 timer.

Igangværende operation

1. Spidsen af pennen på enheden, den buede del fra toppen af posittetilknoppen, hvilket gør arbejdet lettere.
2. Pennespidsen skal monteres på håndtaget i afkølet tilstand (og knappen bør ikke bruges under installationen), skal du bruge den buede del fra spidsen til at skære gutta percha.
3. Sørg for, at pennespidsen er godt installeret før brug. Rengøring: Spidsen er nemt rengøres efter et par sekunders varme.

4. Når percha fyrene er skåret, slip knappen, vent, indtil spidsen køler, før du fjerner det fra patienten. Funktionsknapper "kontaktknop", enheden holder op med at fungere, når knappen er frigivet.

Sikkerhedsforanstaltninger

1. Reachpentip fortsæt på enheden, vennligst ikke bebudet.
2. Hvis kraftener for stærk under behandlingen, ville det være dårligt for pennespidsens liv.
3. Elektromagnetisk bør undgås
4. Enheden må ikke ændres på nogen måde.

Rutinunderhold

1. Febernåle skal rengøres, desinficeres og steriliseres før og efter hver patients brug.
2. Hvis varmeålen ikke genererer varme, skal du straks stoppe driften og kontrollere, om varmespidsen på varmeålen er defekt. Hvis der er fejl, skal du udskifte den med en ny varmeål til tiden.
3. Hvis opladningsindikatoren ikke er tændt, skal du kontrollere, om ladestander er tilsluttet til strømkilde.
4. Febernålen kan steriliseres 25 gange ved høj temperatur og autoklave, hver gang steriliseret ved 134°C i ikke mindre end 5 minutter.

Rengøring, desinfektion og sterilisering

Rengøring

1. Brug en vatpind til at fjerne den resterende tandgel fra varmen.
2. Fordyb dig med en enzymrensner i 5 minutter efter skylningen.
3. Skyl med blødt vand efter iblødsætning, tør det derefter af med en blødt klud med en vandbort for at fjerne flydende tilbagefald.